


FORTALECEDOR DE EJERCICIO DE DEDOS VIVE® (PAQUETE DE 3)*Equipo de Terapia Ocupacional — Extensor de Dedos y Antebrazo con Bola de Agarre Integrada***3 Tension Levels**

Great for all levels of hand rehabilitation

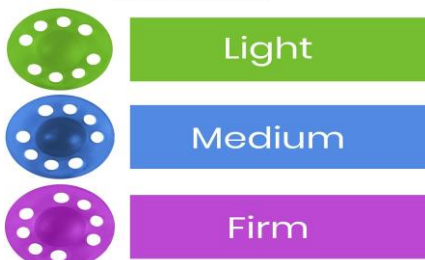

3 niveles de tensión codificados por color: Ligero, Medio y Firme

Flexible & Stretchy

8 Finger holes & an integrated squeeze ball



Diseño flexible y elástico con 8 orificios para dedos y bola de agarre integrada



Set de 3 unidades — verde (ligero), azul (medio) y púrpura (firme)



Modo de uso: estiramiento de dedos con compresión de la bola central

A. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre	Fortalecedor y Extensor de Ejercicio de Dedos — Equipo de Terapia Ocupacional
Modelo	Finger Exerciser Strengtheners (3 Pack) — Hand Extension Exercisers
Composición del set	3 unidades codificadas por color: verde (ligero), azul (medio) y púrpura (firme)
Tipo de producto	Extensor de dedos con bola de agarre integrada, de silicona/TPE flexible
Uso previsto	Estiramiento y fortalecimiento progresivo de dedos, mano, muñeca y antebrazo; apoyo en terapia ocupacional y rehabilitación

B. DESCRIPCIÓN GENERAL

El set de fortalecedores de dedos Vive® (paquete de 3) está diseñado para estirar y fortalecer simultáneamente los dedos y la mano, trabajando de forma específica la musculatura extensora del antebrazo, frecuentemente descuidada en los programas convencionales de fortalecimiento de agarre. Cada unidad cuenta con 8 orificios para los dedos y una bola de compresión integrada en el centro, lo que permite combinar el trabajo de extensión digital (al abrir la mano contra la resistencia del dispositivo) con el fortalecimiento de agarre (al apretar la bola central).

El set incluye tres niveles de tensión progresivos codificados por color —ligero (verde), medio (azul) y firme (púrpura)— lo que permite adaptar la terapia a la etapa de recuperación del paciente: desde ejercicios suaves post-quirúrgicos o post-lesión, hasta el fortalecimiento avanzado de agarre y musculatura extensora. Su diseño ergonómico flexible se adapta a manos de cualquier tamaño, y su material es libre de látex, resistente al desgarro y a la delaminación.

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	TPE (elastómero termoplástico) / silicona flexible, libre de látex
Contenido del set	3 unidades de tensión progresiva + inserto instructivo
Nivel Ligero (verde)	Resistencia suave — recomendado para ejercicios de rehabilitación post-lesión o post-quirúrgicos
Nivel Medio (azul)	Resistencia intermedia — ideal para mantener dedos y manos fuertes y flexibles
Nivel Firme (púrpura)	Resistencia alta — orientado a fortalecer el agarre y la musculatura extensora
Diseño	8 orificios para dedos + bola de compresión integrada en el centro
Adaptabilidad	Diseño ergonómico flexible, se adapta a manos de cualquier tamaño
Durabilidad	Material resistente al desgarro y a la delaminación (splitting/peeling)
Portabilidad	Compacto y liviano, apto para uso en el hogar, consulta clínica o traslado

D. INDICACIONES CLÍNICAS Y USOS

- Síndrome del túnel carpiano (etapas tempranas) y otras neuropatías compresivas de la mano.
- Artritis de mano y dedos — alivio de rigidez y mejora de la movilidad articular.
- Lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y tendinopatías de la musculatura extensora.
- Epicondilitis lateral (codo de tenista) y epicondilitis medial (codo de golfista), mediante el fortalecimiento de la musculatura extensora del antebrazo.
- Rehabilitación post-quirúrgica o post-traumática de mano, muñeca y dedos.
- Entrenamiento complementario para músicos (guitarristas, pianistas, instrumentos de cuerda y viento) y escaladores.
- Fortalecimiento general de agarre para deportistas, adultos mayores, niños y usuarios ocupacionales (trabajo de escritorio, escritura prolongada).

E. MODO DE USO

- Insertar los dedos en los orificios correspondientes del dispositivo, comenzando por el nivel de tensión más ligero (verde).
- Abrir la mano extendiendo los dedos contra la resistencia del dispositivo, estirando progresivamente la banda.
- Sostener la extensión máxima por algunos segundos antes de relajar y regresar a la posición inicial.
- Para trabajar el agarre, comprimir la bola central integrada con los dedos y la palma, manteniendo la contracción algunos segundos.
- Repetir el ciclo de extensión y/o compresión en series cortas, según indicación del profesional tratante.
- Progresar al siguiente nivel de tensión (azul, luego púrpura) a medida que mejora la fuerza y tolerancia del paciente.

F. BENEFICIOS PRINCIPALES

- Trabaja de forma específica la musculatura extensora de los dedos, complementando los ejercicios tradicionales de agarre (flexores).
- Combina en un solo dispositivo el estiramiento/extensión digital y el fortalecimiento de agarre mediante la bola integrada.
- Progresión clara y medible gracias a los tres niveles de tensión codificados por color.
- Apto para todas las edades: niños, adultos, deportistas y adultos mayores.
- Silencioso, portátil y de fácil uso en cualquier entorno (hogar, consulta, oficina, viaje).

G. LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Lavar con agua tibia y jabón neutro; enjuagar y secar completamente antes de guardar.
- Material duradero, resistente al uso repetido sin perder sus propiedades elásticas.
- Evitar exposición prolongada a temperaturas extremas o luz solar directa que puedan degradar el material.
- Almacenar en ambiente limpio y seco junto al inserto instructivo incluido.

H. PRECAUCIONES

- Uso bajo supervisión o indicación de un profesional de la salud en contextos de rehabilitación clínica.
- Suspender el ejercicio ante dolor agudo, hinchazón o molestias persistentes y consultar al profesional tratante.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños que puedan poner las piezas en la boca.
- Producto de uso personal — no requiere baterías ni mantenimiento eléctrico.

FISIOMED Limitada

Representante Legal: Kevin • RUT 76.184.288-9 • Providencia, Santiago, Chile
Distribuidor especializado en equipamiento de kinesiología, terapia respiratoria y rehabilitación física